

Invacare SKI-aftale

50.99 (2026)



Invacare er valgt som SKI leverandør af komfortkørestole og siddepuder til mange af landets kommuner.

I denne folder får du et overblik over hovedprodukterne samt nyttige links til mere information på vores hjemmeside.

Aftalen er gældende fra d. 15. september 2026.



Yes, you can.

Rea Azalea

Komfortkørestol med manuelt eller elektrisk sæde-/rygtilt

Rea Azalea er et ideelt valg til både aktive og passive brugere. Det ergonomiske sædesystem gør det nemt at variere siddestillingen og sikrer høj komfort dagen igennem. Stolen kombinerer stabilitet med bevægelsesfrihed, da det glidende balancepunkt følger kroppens naturlige bevægelser.

Det multijusterbare Flex 3 rygsystem kan tilpasses individuelt i højde, bredde og form - også asymmetrisk - og giver dermed optimal støtte, selv ved komplekse siddestillinger. Stroptrykken leveres med komfortrygslag i sort Aero.

➤ [Læs mere om Rea Azalea kørestolen her](#)



Rea Azalea kan vælges med eleverbare eller faste 80 gr. benstøtter, med lange eller korte armlænsputer, samt med nakkestøtte eller sideværts justerbar hovedstøtte.

Herudover tilbydes diverse tilbehør, eksempelvis hel- og halvborde, hemiplegiarmlæn, amputationsstøtter og **Matrx E2 Dyb** ryg.

- Rea Azalea tilbydes i sædebredder fra 39 – 54 cm og sædehøjder fra 40 – 50 cm.
- Sædedybde, sædebredde samt benbredde justeres trinløst, så kørestolens sæde kan tilpasses brugerens aktuelle behov og efterfølgende justeres, hvis behovene ændrer sig.
- Rea Azalea har en maksimal brugervægt på 135 kg.



➤ [Få information om Matrx E2 Dyb rygsystemet her](#)

Vicair Vector O2

Statisk luftpude til positionering og trykaflastning i højrisiko-gruppen

Vicair Vector O2 er en statisk, tryksårsforbyggende luftpude, der kombinerer effektiv trykaflastning med høj komfort og stor brugervenlighed. Puden er opbygget af patenterede Vicair Smartcells™ – små luftfyldte celler med lav friktionsoverflade – som er fordelt i 9 separate kamre for at sikre optimal støtte.

Vicair Vector O2 er klar til brug med det samme og kræver ingen tilpasning for at yde optimal trykaflastning. De mange Smartcells™ fordelt i 9 kamre gør det muligt at tilpasse støtte og positionering til den enkelte brugers behov, samtidig med at de giver en stabil siddestilling.

Pudens konstruktion reducerer desuden shear- og friktionskræfter, hvilket øger komforten og hjælper med at beskytte huden.

Vicair Vector O2 kræver ingen daglig vedligeholdelse. Der er hverken behov for at kontrollere lufttryk eller ryste puden, da de mange hundrede luftfyldte Smartcells™ sikrer, at puden bevarer sin form og ikke bliver flad over tid.



Med en vægt på kun ca. 800 gram er Vicair Vector O2 nem at transportere og tilføjer ikke unødigt vægt til kørestolen.


Hele puden, inklusive Smartcells™, kan vaskes i vaskemaskine ved 60 °C, mens betrækket kan vaskes separat ved op til 90 °C. Det anbefales at vaske puden cirka hver anden måned for at bevare dens optimale egenskaber og forlænge levetiden.

- Vicair Vector O2 tilbydes i 12 størrelser og dækker brugervægt helt op til 250 kg.
- Vicair Vector O2 leveres med inkontinensbetræk. Standardbetræk kan bestilles som tilbehør.

➤ **Få mere information om Vicair Vector O2 puden her**

Flo-tech Contour Visco

Skumpude til trykaflastning i middelrisiko-gruppen

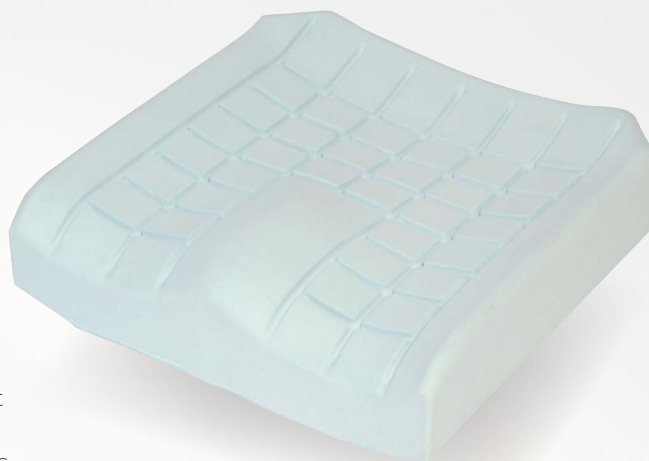

Flo-tech Contour Visco er en trykaflastende, konturformet pude fremstillet i viskoelastisk, temperaturfølsomt skum, som former sig efter kroppens konturer, når det opvarmes af kropstemperaturen. Dette giver en stabil og komfortabel siddestilling, samtidig med at trykket fordeles over en større overflade for optimal trykaflastning.

Pudens konturer giver øget bækkenstabilitet og bedre sidestøtte, hvilket hjælper brugeren med at opretholde en korrekt siddestilling.

Skummet er behandlet med Ultra-Fresh®, der hæmmer væksten af bakterier og støvmider samt reducerer risikoen for lugtgener og derved bidrager til et mere hygiejnisk og holdbart produkt.

Standardbetrækket er et blødt, aftageligt inkontinensbetræk, som er strækbart i alle retninger og derfor ikke modvirker pudens trykaflastende egenskaber.

- Flo-tech Contour Visco tilbydes i 12 størrelser og 3 forskellige skumhårddheder og dækker således vægtgrupper op til 127 kg.
- Flo-tech Contour Visco leveres med standard inkontinensbetræk.

➤ **Læs mere om Flo-tech Contour Visco puden her**

Vi står klar til at hjælpe dig

Invacares dygtige medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig med råd og vejledning om valg af hjælpemidler. Du kan kontakte os på flere måder:

- **Ordreafgivelse på denmark@invacare.dk**
- **Spørgsmål om produkter direkte til din lokale salgskonsulent**

Du finder information om alle Invacares produkter på vores hjemmeside **www.invacare.dk**

Herunder finder du et par genveje:

[Manuelle kørestole](#)

[Vicaire puder](#)

[Matrx rygsystemer](#)

[Flo-tech puder](#)

[Positionering](#)

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.dk
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

