



Invacare® | **Robin®**

Perfekt balance og komfort

Trusted Solutions,
Passionate People



Med den innovative loftlift *Invacare Robin* er der tænkt på såvel bruger som plejepersonale. De to unikke løftestropper sikrer maksimal kontakt bruger og hjælper imellem, og gør dermed forflytningssituationer mere behagelige. Systemet uden løftbøjle sikrer brugeren en stabil og tryk forflytning - med værdigheden i behold.



Komfort

Det unikke design med to løftestropper giver uovertruffen stabilitet ved forflytning. Den indbyggede "soft start" funktion gør løftet mere behageligt for brugeren, og motorens to forskellige hastigheder reducerer tidsforbruget i forbindelse med forflytning. De to løftestropper justerer sig automatisk efter brugerens størrelse og eliminerer derved behovet for løftbøjler i forskellige størrelser.

En værdig forflytning

Personlig kontakt ved forflytning er yderst vigtig. *Invacare Robin* er et bøjleløst system, der giver mulighed for tættere kontakt og sikrer god kommunikation og øjenkontakt mellem bruger og hjælper. Robin gør med andre ord en forflytning mere værdig.



Let at arbejde med - let at anvende

De patenterede løftestropper gør det let for hjælperen at montere sejlet korrekt med et minimum af kræfter, og med den selvåbende sejlhængsel er sikkerheden helt i top. Motoren køres let, via skinnesystemet, i rette position. Den brugervenlige håndbetjening har tydelige funktionstaster, og er let at anvende. Et behageligt blå lys på undersiden af motoren lyser, når liften er i brug og „fortæller“ brugeren, at der liffes.

Egenskaber



**Nødstop og
nødsænkning**



**Selvjusterende stropper
der automatisk justerer
sig efter brugeren**



**Selvåbende løftekroge
der automatisk lukkes
ved brug**



**Håndbetjening der
kan udskiftes uden at
afmontere løftemotor**




Robin

Robin er udviklet med sikkerheden for øje. Her er der ingen risiko for hovedskader på et tungt løfteåg, der i en forflytningssituation pludselig drejer rundt.



Robin Mover

Med integreret motor til bevægelse langs traversen.

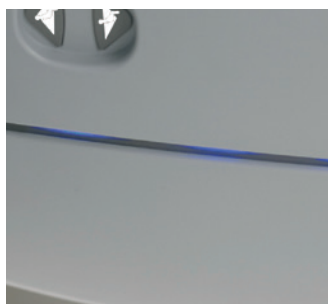

Lysindikator

Det blå lys indikerer at der liftes og blinker når liften skal lades op.



Opladning

Nem opladning via håndbetjening og vægmonteret lader.



Ekstra sikkerhed

Mulighed for at tilkoble nødbatteri udenpå løftemotoren.



Ekstra kontrolltaster

Hvis håndbetjening mod forventning skulle være defekt, kan løftemotoren betjenes direkte på undersiden.ç



Vægt

Mulighed for at montere vægt.



Skinnekompatibilitet

Robin kan ved hjælp af en særlig kørevogn monteres i alle almindeligt forekommende skinnetyper.



Nem betjening

Smart holder til montering på løftestrop.










Nem montering

Robin kan let monteres i skinnerne uden brug af værktøj.

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.


	Length of motor	Width of motor	Height of motor	Strap length	Strap length increments	Total product weight	Max. user weight
Robin	 470 mm	 250 mm	 203 mm	 2,5 meter	 3 cm/s (85 kg), 4 cm/s (0 kg)	 7,3 kg	 200 kg
Robin Mover	470 mm	250 mm	316 mm	2,5 meter	3 cm/s (85 kg), 4 cm/s (0 kg)	10 kg	200 kg



Bariatric use

Farve

Hvid/grå



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



© 2017 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Robin - DK - 11/2017

Robin - EU - 11/2016