



matrix[®]
SEATING SERIES

Matrix Libra puden giver god trykaflastning, positionering samt komfort

- **Libra** er en formpresset, konturformet skumpude, der giver en rigtig god trykaflastning samtidig med en stabil siddestilling
- Bagerst sikrer et dobbelt lag af silikone fordelt i to kamre mod shear og giver optimal komfort
- Anatomisk udformet skumbase med brønd til tuber og trochanter sikrer god balance og stabilitet af bækkenet og kroppen
- **Libra** understøtter funktionelle behov for fx trykaflastning samt behovet for at kunne leve et aktivt liv ved at have en meget let vægt og ved at være vedligeholdelsesfri
- **Libra** leveres som standard med strækbart inkontinensbetræk samt en beskyttelsesbarriere mod indtrængen af fugt.

Trusted Solutions, Passionate People

INVACARE
Yes, you can.®



Anatomisk pudedesign

- Skumbasen - formet specielt til at give bækkenstøtte og trykaflastning af tuber og trochanter.
- Fremstillet i en god skumkvalitet med høj vægtfylde og med Ultra-Fresh™ antimikrobiel behandling mod støvmider, bakterier og dertil hørende lugtgener.

Mange funktionelle fordele

- Blød formet brønd giver optimal støtte af tuber og forhindrer fremadglidning og shear.
- Anatomisk formet støtte til trochanter fremmer lateral stabilitet af bækkenet.
- Pudens form bagtil forhindrer bagudkip af bækkenet.
- Skrå forkant sikrer fuld understøttelse samt giver plads, når stolen gøres frem eller ved stramme hasemusklers.
- Let abduktionskile for til understøtter positionering af lår og ben.

Brugervenlig og pålidelig

- Dobbelt silikonelag i opdelt rum sikrer maksimal aflastning af bækkenet inklusiv tuber og trochanter.
- Silikonen skal ikke æltes og puden er derved vedligeholdelsesfri og tidsbesparende.
- **Libra** vejer kun ganske lidt og er enkel at tage med sig overalt.

Egenskaber og tilbehør



Siddeflade

Stor konturformet overflade sikrer den bedste trykfordeling.



Trykfordeling

Libras unikke udformning sikrer, at vægten fra kroppen og bækkenet fordeles til hele siddefluden.



Trykaflastning

Knoglefremspring som tuber og trochanter trykaflastes komfortabelt af to separate silikonelag.



Nedsat shear


Unik udformning af puden sikrer mod fremadskridning og shear.

Egenskaber og tilbehør



Skrå forkant

Sikrer fuld understøttelse samt giver plads ved forflytninger, når stolen gæses frem eller ved stramme hasemuskler.

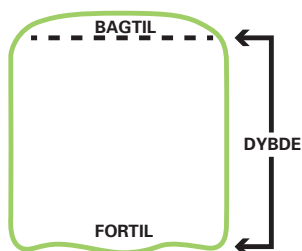

Pudeudformning bagtil

Libra har øget dybde bagtil for at udfylde afstand mellem kørestolssæde og ryglæn.



Aflastning af halebenet

Libra er blødt formet med plads til tuber og haleben samt støtte til trochanter for at sikre god trykaflastning og stabilitet.



Frontkile

Kan anvendes som ekstra tilpasning af **Libra** for at forhindre fremadglidning og shear.



Tilpasset frontkile

Velegnet ved for eksempel nedsat bevægelighed i den ene hofte eller når stolen gæses frem med et ben.



Konisk hjørnekile

Ved behov for let øget støtte lateralt fortill.



Konisk hjørnekile

Hjørnekilen kan også placeres ved bagerste hjørne ved for eksempel bækkenskævhed.



Sidekile

Sikrer lateral stabilitet og støtte - og når placeret i begge sider som på billedet øges positionering i midtlinie.



Ekstra silikoneindlæg

Et halvt silikoneindlæg kan tilføjes i en eller begge sider. Velegnet ved behov for øget trykaflastning eller ved bækkenskævhed.



Abduktionskile

Anvendes ved behov for øget komfortabel anatomisk korrekt støtte og positionering af lår og ben.



Sidelomme i betrækket

Som standard er tilføjet en mindre aflukket lomme i betrækket til fx nøgler eller småpenge.

Tekniske data



Matrx Libra Antal størrelser: 16¹



Højde: 10 cm



Vægt: 1,6 kg



Max brugervægt:
Std 136 kg
HD 227 kg



Rengøring af
inkontinensbetræk
80°




Indvendigt betræk:
Tørres af med
deinficerende
væske



- 1/ De 6 største størrelser specielt velegnet til store brugere med max brugervægt op til 227kg
- 2/ Denne pude overholder "Forordningen om restriktioner om farlige stoffer/materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr" - RoHS (2011/65/EC)
- 3/ Denne pude overholder "Forordningen om anvendelse af kemikalier, der er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø" - REACH

Betræk

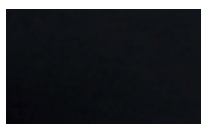

Sort

- Betræk:
- Vandafvisende
 - Åndbart
 - Strækbart



Ultra-fresh™

Matrx anvender skum, der er behandlet med Ultra-Fresh. Ultra-Fresh er en antimikrobiel behandling af skummet, der beskytter mod støvmider, bakterier og dertil hørende lugtgener.

- Mindre lugtgener
- Større holdbarhed
- Større genbrugsværdi
- Kan anvendes af støvmideallergikere

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Matrx Libra - DK - 09/2016



Yes, you can.®