

Küschall® K-SERIES



UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Küschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig ønsker det. Küschall K-Series kørestolen giver brugeren de bedste muligheder for at være aktiv og opleve nye spændende eventyr uden begrænsninger. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL K-SERIES

K-Series er et **ikon** indenfor design og en trendsætter indenfor fastrammekørestole. Det geniale **modulære siddesystem** kan tilpasses efter brugerens behov, og hele kørestolens dynamiske opsætning giver brugeren de **bedste køreegenskaber.**

HYDROFORM

Styrke, lethed og stivhed. Den nye designteknologi med den hydroformstøbte ramme på K-Series øger stivheden og forbedrer derved køreegenskaberne. Den hydroforme forramme skaber et ergonomisk greb tæt ved sæderammen, der er særligt fordelagtigt for brugeren under forflytninger. Det ikoniske design gør K-Series elegant og diskret på samme tid - perfekt til den aktive bruger, som stiller store krav til sin kørestol.

HYDROFORM FORRAMME

- Den hydroformstøbte ramme giver et ergonomisk greb på forrammen, hvilket er ideelt ved repositionering eller som støtte ved forflytninger. Forrammen kan vælges enten med 90° eller 75° knævinkel.

AKTIV LETVÆGTSBREMSE

- Den aktive letvægtsbremse er fremstillet i 100% aluminium og designet, så den matcher de moderne linjer på det hydroforme chassis - lav vægt, let betjening og optimal sikkerhed.

V-FORMET FORRAMME

- Som option er der muligheden for V-formet forramme, hvilket gør kørestolen slankere og støtter godt op om brugerens ben.

FODBØJLE

- Fodbøjlen er designet med en flad og behagelig overflade med god støtte til fødderne.



Küschall® K-SERIES

HYDROFORM RYGBØJLE

- Den stærke, hydroformede rygbøjle giver et godt greb og gør stolen nemmere at løfte, fx ind og ud af bilen.

JUSTERBAR RYG

- Den foldbare ryg har indbygget mulighed for 6 forskellige rygvinkler, så den bedste støtte let kan opnås.

SÆDEMODUL

- Det unikke sædemodul kan indstilles i 5 forskellige positioner, så balancepunktet kan finjusteres.

FORHJULSOPHÆNG

- Den enkle og smarte aluminiumsprofil på forhjulsophænget matcher det elegante design på resten af kørestolen.


FORHJULSGAFFEL

- Forhjulsgaflerne er fremstillet i et enkelt design med indgrede lejer, der letter vedligeholdelse og hindrer opsamling af støv mv.

EGENSKABER

IKONISK

K-Series hydroforme chassis, i kombination med den ikoniske, minimalistiske og åbne ramme samt den lave vægt, giver brugeren mulighed for at nyde hverdagens aktiviteter. Uanset om det drejer sig om arbejde, fritidsaktiviteter eller bare en køretur, vil K-Series give brugeren muligheden for at klare sig selv og komme vidt omkring.

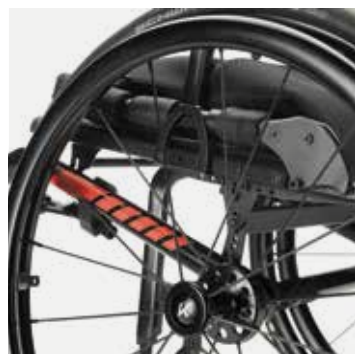


MODUL-JUSTERBAR

På K-Series kan balancepunktet let justeres ved at flytte sædemodulet tilbage eller frem i fem forskellige positioner. Skruer og beslag er gemt ad vejen under sædet, så sædet nærmest svæver. Balancepunktet kan ændres ved skiftende behov, uden at ekstra komponenter er påkrævet.

DYNAMISK

De bedste køreegenskaber ved brug af minimum af kræfter opnås med en helt stiv og fast kørestolsramme. På K-Series er ramme, forhjul og drivhjul altid korrekt forbundne og helt afstivet. Balancepunktet ændres ved at skyde sædet frem eller tilbage i forhold til rammen.

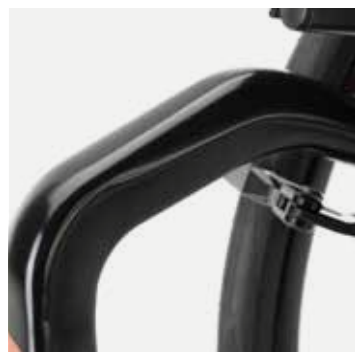


HYDROFORME FORRAMME

Den nyeste teknologi indenfor fremstilling af kørestole er hydroforming, hvilket gør K-Series endnu stærkere. Et ikonisk look, der er let genkendeligt takket være det lige design omkring knæområdet. Med en kørestolsramme som K-Series, der er yderligere afstivet, bliver køreegenskaberne ikke bedre.

PERSONLIGE VALG

1 STANDARDFARVER

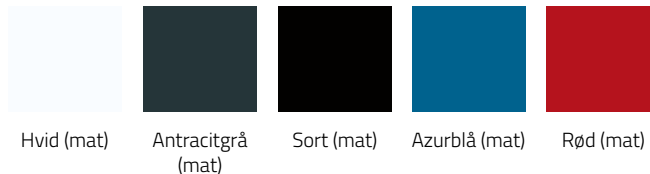

SPECIALFARVER*




* 10 dages ekstra leveringstid ved valg af specialfarve

2 VÆLG LOGODESIGN



3 VÆLG PRINTFARVE

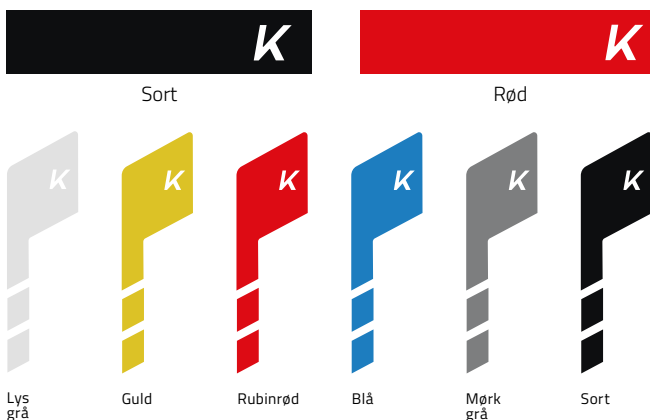

TEKNISKE DATA

SÆDE-BREDDE

320 – 500 mm
interval 20 mm



SÆDE-DYBDE

350 – 525 mm
interval 25 mm



UNDERBENS-LÆNGDE

290 – 480 mm
interval 10 mm



RYG-HØJDE

270 – 480 mm
interval 15 mm



RYG-VINKEL

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



SÆDE-HØJDE

For: 450 – 520 mm
Bag: 390 – 490 mm
interval 10 mm



RAMME-VINKEL

75° / 90°
Lige eller V-formet



TOTAL-BREDDE

SB + 170 mm



TOTAL-LÆNGDE

75°: ca. 830 - 1055 mm
90°: ca. 760 - 985 mm



BALANCE-PUNKT

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMBRING

0° / 3° / 6°



TOTAL-VÆGT

ca. 7.8 kg



TRANSPORT-VÆGT

ca. 5.1 kg



MAX BRUGERVÆGT

130 kg



CRASH TESTET

Opfylder krav jvf.
ISO 7176-19



Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebrede 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan ændres med forskellige konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.

K

UNLIMIT YOUR WORLD

Tlf.: +45 36 90 00 00
www.invacare.dk
denmark@invacare.com

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world og K-Series er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder Invacare International GmbH sig ret til at tilpasse de enkelte modeller.

© Juni 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. DK - 1659367