

**Küschall®**  
**COMPACT**



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Hos Kuschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig ønsker det. Den pålidelige og foldbare Compact kørestol giver brugeren alle muligheder for nye spændende oplevelser. **Unlimit your world.**

## **KÜSCHALL COMPACT**

Kuschall Compact er den perfekte kombination af pålidelighed og **høj kvalitet**. Compact leveres med svingbare benstøtter, der let kan tilpasses brugerens behov og dermed **forbedre komforten**. Uanset om der er brug for et højere konfigurationsniveau eller en mere enkel aktiv kørestol, passer Compact's fremragende funktionalitet.

## **HYDROFORM**

Hydroformning er en ny designteknologi, der sikrer optimal styrke og stivhed samt en lettere vægt. Det flotte design med den hydroformede kørestolsramme giver de bedste køreegenskaber, samtidig med, at Compact kørestolens alsidighed sikrer høj brugerkomfort for enhver.

## HYDROFOM

■ Det hydroforme design giver en stærk konstruktion. Benstøtter på Küschall Compact er ligeledes hydroformstøbte, hvilket gør dem yderst stærke, stabile og lette

## BENSTØTTER

■ Benstøtterne svinges let til side og tages af, når brugeren skal forflytte sig, have fødderne på gulvet eller ved transport af Compact, fx i et bagagerum.

## FODPLADER

■ Fodpladerne er med slidstærk antiskrid overflade og klappes let op ved forflytning.



# Küschall® COMPACT

## FOLDEMEKANISME

- Med den unikke foldeenhed kan brugeren let folde kørestol inklusiv ryglæn sammen ved et enkelt tag i rygstrop og sædepolster.

## SÆDEKRYDSD

- Sædekrydset på Compact er specielt designet med henblik på at støtte brugere med nedsat styrke, og sikre, at kørestolen nemt kan foldes ud eller sammen igen.

## RETNINGSSTABIL KØRSEL

- Den enkle og intuitive indstilling af forhjulet sikrer, at køreretningen holdes stabil.

## FORHJULSGAFLER

- Forhjulsgaflerne er fremstillet i et enkelt design med integrerede lejer, der letter vedligeholdelse og hindrer opsamling af støv mv.

# EGENSKABER

## FOLDBAR OG STABIL

Küschall Compact er en særdeles stabil og utrolig stiv krydsrammekørestol, hvilket giver meget gode køreegenskaber. Compact foldes enkelt sammen takket være et specialdesignet sædekryds på krydsrammen, hvilket sikrer, at sammenklapningen også kan udføres af brugere med nedsat muskelstyrke.



## LETTE BENSTØTTER

Compact har meget lette, svingbare og aftagelige benstøtter, hvilket giver optimal plads til fødderne, fx ved forflytninger eller hvis brugeren ønsker at gå kørestolen frem. Benstøtterne er meget stabile og kan vælges i henholdsvis 70° eller 80° knævinkel.



## KOMFORT

Ryggen på Compact er vinkelindstillelig samt justerbar med stropper for at sikre den bedste komfort og støtte. Når Compact skal foldes sammen, kan ryggen blot slås ned og foldes med resten af kørestolen, hvilket giver en meget kompakt stol ved transport.




## LETHED OG HYDROFORM

Den innovative hydroformede ramme gør Compact utrolig let samtidig med, at designets udformning giver et behageligt og ergonomisk greb øverst på benstøtterne. Denne detalje giver støtte for brugeren under repositionering og ved forflytninger.



# PERSONLIGE VALG

## 1 STANDARDFARVER

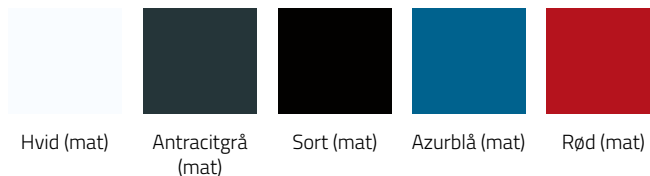

## SPECIALFARVER\*




\* 10 dages ekstra leveringstid ved valg af specialfarve

## 2 VÆLG LOGODESIGN



## 3 VÆLG PRINTFARVE

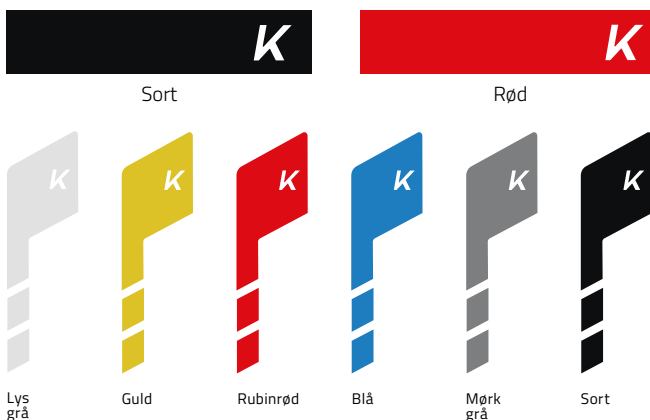

# TEKNISKE DATA

## SÆDE-BREDDE

280 – 500 mm  
interval 20 mm



## SÆDE-DYBDE

320 – 500 mm  
interval 20 mm



## UNDERBENS-LÆNGDE

200 – 510 mm  
interval 10 mm



## RYG-HØJDE

300 – 510 mm  
interval 15 mm



## RYG-VINKEL

82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



## SÆDE-HØJDE

For: 370 – 530 mm  
Bag: 360 – 500 mm  
interval 10 mm



## RAMME-VINKEL

70° / 80°  
Lige eller V-formet



## TOTAL-BREDDE

SB + 160 mm



## TOTALBREDDE FOLDET

ca. 290 mm



## TOTAL-LÆNGDE

70°: ca. 870 – 1220 mm  
80°: ca. 850 – 1200 mm



## CAMBRING

0° / 3°



## TOTAL-VÆGT

Ca. 10.5 kg (aftagelige benstøtter)  
Ca. 9.6 kg (fast forramme)



## TRANSPORT-VÆGT

Ca. 7.8 kg (aftagelige benstøtter)  
Ca. 6.7 kg (fast forramme)



## MAX BRUGERVÆGT

130 kg



## CRASH TESTET

Opfylder krav jvf..  
ISO 7176-19



Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebredde 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan ændres med forskellige konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.

# K

**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

Tlf.: +45 36 90 00 00  
www.invacare.dk  
denmark@invacare.com

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
2605 Brøndby  
Danmark

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world og Compact er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder Invacare International GmbH sig ret til at tilpasse de enkelte modeller.

© Juni 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. DK - 1659369