

Dolomite[®] Gloss



Perfekt kombination af sikkerhed,
holdbarhed og nytænkende design

LETVÆGT | ALLROUND | DESIGN



Gå hele vejen med Gloss

Invacare udvider vores udvalg af fantastiske **Dolomite** rollatorer med den innovative og lette **Gloss** familie. **Dolomite Gloss** er den ideelle rollator til brug både ude og indendørs. **Gloss** giver brugeren optimal støtte og fremmer selvstændighed og daglig mobilitet. **Gloss** er stabil og robust og beror på de velkendte værdier fra vores andre **Dolomite** rollatorer: **høj kvalitet, holdbarhed og tidsløst design.**

Gloss har et moderne og elegant udseende og fås i 4 sædehøjder fra 450 mm til 680 mm. Med et meget stort tilbehørsprogram og en max brugervægt helt op til 160 kg, er **Gloss** velegnet til langt de fleste brugere og deres individuelle behov.

Gloss er med en ekstremt let og robust aluminiumsramme særdeles velegnet til transport samt opbevaring. Den sideværts foldbare rollatorramme giver optimal plads til ubesværet gang, mens det faste og stabile sæde giver brugeren støtte og komfort i den siddende stilling. For optimal sikkerhed har **Gloss** såvel hørbart som visuelt signal ved korrekt udfoldning.

Med sin alsidighed, kvalitet og stabilitet giver **Gloss** alle brugere mulighed for at gå sikkert hele vejen med en elegant stil.



Let transport og opbevaring

Selve rammen på **Gloss** foldes enkelt sammen med et let træk i det blå greb under sædet og efter sammenfoldning har **Gloss** en ekstrem smal bredde. Dette gør **Gloss** perfekt til opbevaring selv ved mindre opbevaringsplads. **Gloss'** design betyder, at den også kan opbevares sikkert i en sammenfoldet, opretstående position, når rollatoren ikke er i brug.

Gloss er designet i aluminium med lav vægt, og høj kvalitet. Den ekstremt lave vægt sikrer, at **Gloss** let kan løftes ind i bagagerummet på en bil. Den lave vægt fremmer mulighederne for øget uafhængighed for brugeren.

LÆG

SÆRLIGT MÆRKE
TIL



1

Stort gangareal

- ▶ Rigelig plads til benene inde i selve rammen fremmer en naturlig kropsholdning samt et naturligt gangmønster

2

Højdejusterbare ergonomiske greb

- ▶ De fremadrettede, ergonomiske skubbegreb kan trinløst højdejusteres

3

Sideværtsfoldbar letvægtsramme

- ▶ **Gloss** har en ekstremt lav vægt og sammenfoldet fylder den kun 19 cm. Dette gør, at rollatoren er let at håndtere samt opbevare i stående position

4


Mange muligheder

- ▶ Med 4 forskellige sædehøjder samt et omfattende udvalg af tilbehør sikres, at **Gloss** kan tilpasses til en brugers skiftende behov eller at den let kan genbruges til en ny bruger

Læg også mærke til

- ▶ Diskrete bremsekabler understreger det enkle og moderne design
- ▶ Kombinationen af parkerings- og kørebremse gør det let at stoppe op og tage et hvil
- ▶ Sikkerhedsstrop holder **Gloss** sammenfoldet, når rollatoren ikke er i brug
- ▶ Det enkle og elegante design gør det let at nå varer eller lignende i den foldbare kurv
- ▶ Sikker gang henover dørtrin eller lignende ved hjælp af smart og integreret trædepedal
- ▶ Stor kompatibilitet mellem tilbehør og enkeltdele i **Gloss** familien understøtter god driftsøkonomi for depotet.

Flere fordele

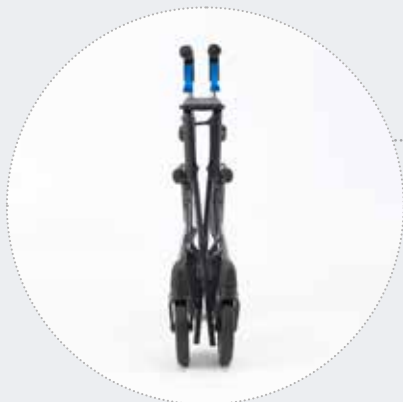

◀ Krydsfoldbar letvægtsramme

Ud over at være ekstremt let har **Gloss** en imponerende max brugervægt på helt op til 160 kg.


Foldemekanismens design sikrer, at **Gloss** er yderst smal, når den står sammenfoldet, hvilket gør det muligt at opbevare rollatoren selv ved snæver plads.

Den lave vægt sikrer, at brugeren og hjælperen let kan løfte **Gloss** i forbindelse med transport fx ud og ind af bus, tog eller ind i bagagerummet på en bil.



◀ Individuelle behov

Gloss fås i 4 sædehøjder: 450 mm, 520 mm, 600 mm og 680 mm, hvilket gør **Gloss** er egnet til bred brugermålgruppe. **Gloss'** alsidighed forbedres yderligere med et omfattende tilbehørsprogram, der giver mulighed for enkelt at tilpasse rollatoren individuelt afhængigt af brugerens tilstand eller specifikke behov.

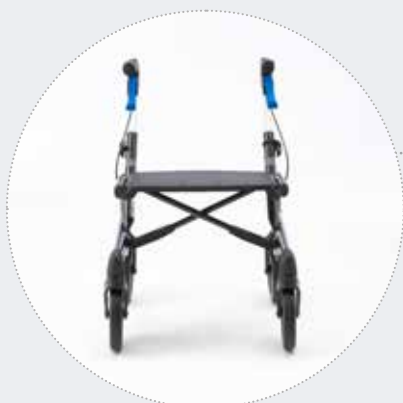

◀ Stort gangareal

Et af kendetegnene for **Dolomite** rollatorer er, at de er designet med god plads til ben og fødder under gang. Dette er vigtigt for at fremme en god ergonomisk kropsholdning samtidig med, at brugeren får både behagelig støtte og et optimalt gangmønster.



◀ Højdejusterbare ergonomiske skubbehåndtag

Højden på skubbehåndtagene kan hurtigt, trinløst og let justeres hjælp af en ergonomisk fingerskrue. De fremadrettede og ergonomiske håndtag kan roteres indad 20° for at imødekomme brugere med begrænset bevægelighed i håndleddene. Bremsegreb og foldeudløseren er designet i en diskret blå farve for at tydeliggøre betjeningsmulighederne selv for svagtseende.

Dolomite Gloss familien

Den nyeste rollator med alle de velkendte *Dolomite* fordele
 Kombination af klassisk stil og styrke



	<i>Gloss</i> 450	<i>Gloss</i> 520	<i>Gloss</i> 600	<i>Gloss</i> 680
Skubbehøjde*	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Max brugervægt	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Sædehøjde	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Vægt	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

Følgende tilbehør kan anvendes til alle *Gloss* modeller:

- ▶ **Rygstrop:** Giver en tryk og behagelig lændestøtte
- ▶ **Stokkeholder:** Gør det nemt at have stokken med
- ▶ **Foldbar blød kurv:** Kan enkelt afmonteres eller foldes sammen med rollatoren
- ▶ **Bakke:** Aftagelig bakke til transport af fx tallerken og kop
- ▶ **Trædepedal:** Ekstra hjælp ved forcering af dørtrin eller kantsten
- ▶ **Slæbebremse:** Hjælp til at nedsætte farten eller give en mere stabil køreretning
- ▶ **Bremseforstærker:** Giver ekstra bremsestyrke til svage hænder



Tekniske data ▼

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Totalbredde ▼



Dybde ▼



Afstand mellem hjul ▼



Skubbehøjde / højdeinterval** ▼



Sædehøjde ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss ⁵²⁰	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Sædebredde ▼



Hjul-diameter ▼



Max brugervægt ▼



Vægt ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
Dolomite Gloss ⁵²⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

*Afstanden mellem skubbehåndtagene er målt i laveste højde

Farve ▼



Antracitgrå

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®