

matrix[®]

Rygserie tilbehør

Når der skal mere støtte til



* Alle hovedstøttepuder leveres som standard med sort aftageligt betræk



Yes, you can.[®]

Tilbehørsbrochure til matrix rygserie

Læs i denne brochure om det store tilbehørsprogram særligt velegnet til matrix rygserie. Der er mange muligheder for at give ekstra støtte og komfort: Forskellige hovedstøttepuder, støttebøjler, kropsstøtter og meget mere. Flere af delene kan også anvendes til Invacares kørestole, der ikke har en matrix ryg monteret.

Hovedstøttepuder



Komfort

Blødt trykaflastende skum giver behagelig støtte.



Holdbare

Det formstøbte skum holder faconen og er fremstillet med Ultra-fresh™ antimikrobiel behandling, der beskytter mod støvmider, bakterier og lugt.



Letvægt

Let design og let at håndtere.



Justerbar støtte

Den indvendige aluminiumsplade i i skummet kan bøjes og formes for at give en stabil og præcis støtte.



Betræk

Alle hovedstøttepuder leveres som standard med et formsyet betræk fremstillet af åndbart, væskeafvisende og komfortabelt materiale. For rengøring er betrækket forsynet med lynlåse, så det er let at tage af og på.



Standard hovedstøtte

Hovedstøttepuderne kan formes til at give støtte posterior og lateralt. Der kan vælges mellem 2 størrelser:

Small: 250 x 130 mm eller
Large: 360 x 130 mm.



4-punkt hovedstøtte

4-punkt hovedstøtte giver en blød og nænsom støtte til en lang større del af hoved og nakke. Kan ligeledes formes.

Der kan vælges mellem
Small: 240 x 190 mm eller
Large: 280 x 260 mm.



Occipital hovedstøtte


Den occipitale hovedstøtte er let buet, og giver komfortabel støtte i nakken og op bag på hovedet. Der kan vælges mellem 2 størrelser:

Small: 230 x 180 mm eller
Large: 310 x 200 mm.

matrix[®] LOXX™

LOXX hovedstøttebøjle

Matrix[®] LOXX™ er en enkel, justerbar bøjle til hovedstøttepuden på Matrix ryggen. Med 4 justeringspunkter er LOXX bøjlen en funktionel løsning til de fleste brugere.

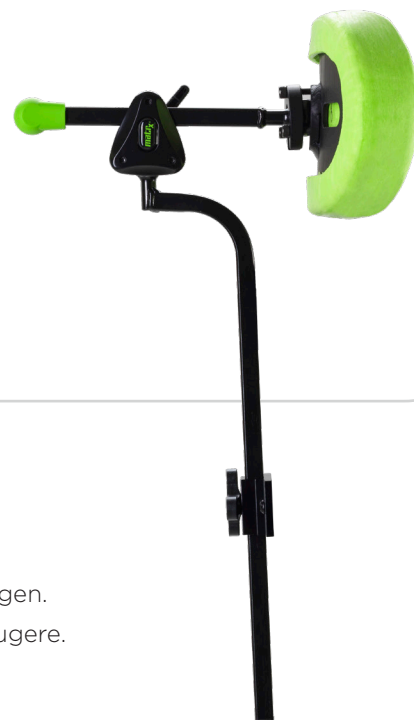

Enkel montering

Find den rigtige position af hovedstøttepuden ved hjælp af enkle og intuitive indstillinger på LOXX støttebøjle.

Der er mange muligheder for støtte af nakke og hoved til fx brugere med moderat kyfose eller nedsat lateral styring af hovedet.

Mange justeringsmuligheder

Beslag "husker" højden på hovedstøtten, hvis hovedstøttebøjlen afmonteres ved for eksempel pålægning af sejl eller forflytning.

Holdbart beslag


Det patenterede design af støttebøjlen er crashtestet og giver sammen med hovedstøttepuden en stabil og sikker positionering.

Læg mærke til

- > Pivotkugle til justering af selve hovedstøttepuden giver præcis støtte.
- > Enkel justering i dybde og vinkel kan vælges med fingerskrue, så det bliver let at finjustere.
- > Grøn blød endeprop for øget sikkerhed og synlighed.



Justeringsmuligheder af LOXX™ støttebøjle og hovedstøttepude

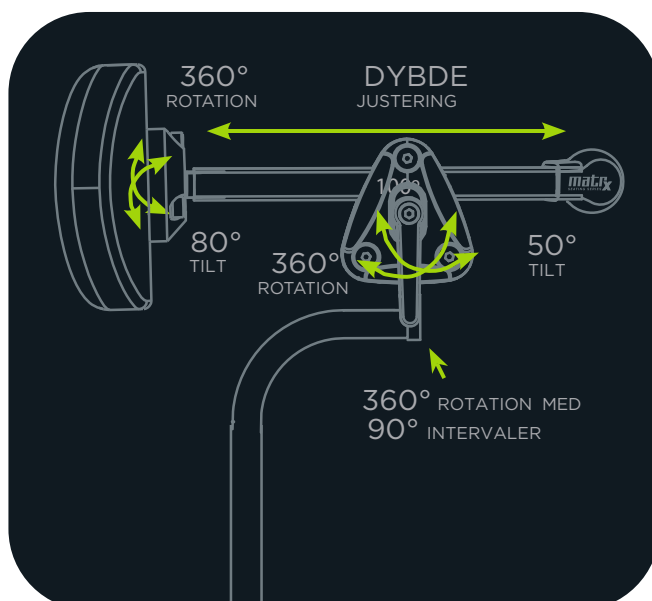

matrix[®] ELAN[®]

Elan hovedstøttebøjle

Matrix[®] Elan er en kompakt, multijusterbar hovedstøttebøjle i et enkelt moderne design. Elan støttebøjle er bøjlen med flest justeringsmuligheder, så den allerbedste støtte kan tilbydes også til de svære positioneringsudfordringer.

Enkelt design

Invacares sorte Elan støttebøjle er designet til at virke enkel i udseende på trods af stor styrke og utallige muligheder for indstillinger. Se illustration for alle de vinkler, der er mulige at kombinere for nøjagtig støtte.

Multi-disk hængselled

De innovative multi-disk hængselled er yderst stærke og stabiliserer den indstillede position.

Mange justeringsmuligheder

Elan støttebøjle kan indstilles i 5 led med enten fingerskrue eller en unbrachonøgle. Dette gør Elan støttebøjlen sammen med en hoved- eller nakkestøttepude i stand til at støtte brugerens nakke eller hoved selv ved svære positioneringsudfordringer.




Læg mærke til

- > Som standard er støttebøjlen leveret med faste unbrakoskruer. Fingerskruer kan anvendes, hvis positioneringen skal ændres ofte
- > Vælg først mellem 3 forskellige hovedstøttepuder og derefter mellem 2 støttebøjler for det bedste resultat.



Justeringsmuligheder af ELAN støttebøjle og hovedstøttepude

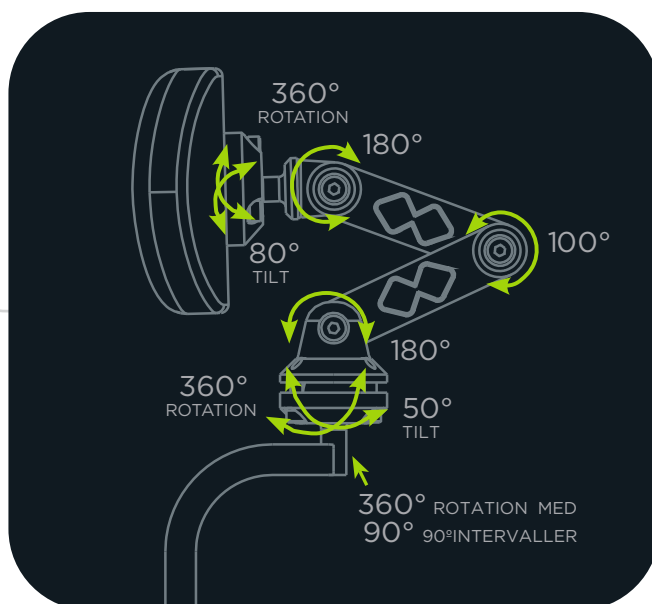

Tilbehør **Matrix® E2** **standard rygserie** - kropsstøtter

Faste kropsstøtter

Monteres på indersiden eller ydersiden af rygskallen.
Justerbar i højden (64 mm) på rygskallen. Findes i højre eller venstre version 127 x 191 mm (HXB).



Svingbare kropsstøtter

Monteres på indersiden af rygskallen uden at påvirke justeringen af dybde/-vinkel. Svinges til siden med et enkelt tryk på en trykknop. Findes i højre eller venstre version 95 x 146 mm (HXB).



Tilbehør

Bækkenstøtte

Behagelig ekstra støtte til bækkenet for at hjælpe til en ergonomisk opret siddestilling

- Kontur- og anatomisk udformet støtte til PSIS/ bækkenkanten
- Monteres i ønsket højde på rygskallen ved hjælp af burrebånd og dækkes af selve rygpolstringen og betræk.



Overgangsdække

Til anvendelse mellem ryg og sæde. Samme betræk som selve ryggen. Fås i størrelse medium og large.



Ekstra beskyttende overtræk

Ved behov for ekstra hygiejne eller afvaskning kan vælges et aftageligt betræk. Det er let at montere eller afmontere for vask - og kan tørres af med en fugtig klud ved behov.



Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website:
www.invacare.dk/da



Matrix LOXX ▼



Matrix Elan ▼

Hovedstøttebøjler

380 x 115 mm**

380 x 260 mm**



Standard hovedstøtte ▼



Occipital hovedstøtte ▼



4 punkt hovedstøtte ▼

Hovedstøttepuder

Small
250 x 130 mm

Small
230 x 180 mm

Small
240 x 190 mm

Large
360 x 130 mm

Large
310 x 200 mm

Large
280 x 260 mm



Sort betræk

* Invacare® Matrix® Elan® og Invacare® Matrix® LOXX™ hovedstøttebøjler samt hovedstøttepuder er crashtestet i henhold til ISO7176-5 (2019) Kørestole anvendelige som sæder i motorkøretøjer og ISO 16840-4 (2009) DS/ISO 16840-4:2009 Kørestolssæder - Del 4: Sæder til brug i motorkøretøjer.

** + 70 mm til hver side, højre eller venstre.



Ultra-Fresh

Matrix anvender skum, der er behandlet med **Ultra-Fresh. Ultra-Fresh** er en antimikrobiel behandling af skummet, der beskytter mod støvmider, bakterier og dertilhørende lugtgener.

- Mindre lugtgener
- Større holdbarhed
- Større genbrugsværdi
- Kan anvendes af støvmideallergikere

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark



© 2022 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.
Invacare Matrix Headrests - DK - 05/2022 - V2



Yes, you can.®