

Küschall®
THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Kuschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig ønsker det. THE KSL kørestolen giver den erfarne kørestolsbruger optimale muligheder for at være aktiv og opleve nye spændende eventyr uden begrænsninger.

Unlimit your world.

THE KSL®

THE KSL® er indbegrebet af **elegance**. Banebrydende teknisk innovation forenes med elegant design overalt på stolen.

THE KSL fremstilles efter personlige mål og nøje **individuel tilpasning** til den erfarne bruger, der nøjagtig ved, hvordan deres kørestol skal være. Kørestolen er **superlet** og tilbyder køreegenskaber og elegance, som kan tilfredsstille selv den mest kræsne bruger.

HYDROFORM

Det fuldsvejste, hydroformede kørestolschassis giver en total stivhed, hvorved brugeren opnår en let og ubesværet kørsel. Aldrig før er teknikken fusioneret så perfekt med smukt design. THE KSL® kan konkurrere med carbonprodukter rent styrke- og vægtemæssigt, og er tilmed perfektioneret med optimale køreegenskaber og et enestående design.

HYDROFORM FORRAMME

- Den hydroforme ramme giver øget stivhed og de bedste køreegenskaber samtidig med et ergonomisk greb udfor selve sædet, hvilket er ideelt ved repositionering eller som støtte ved forflytninger.

LET AKTIVBREMSE

- Den aktive letvægtsbremse er fremstillet i et minimalistisk og enkelt design, så den matcher de moderne linjer på det hydroforme chassis - Lav vægt, let betjening og precision til mindste detalje.

CARBON AKSEL

- Den stærke og lette aksel er fremstillet i carbon for at give optimale køreegenskaber.

TITANIUM FODPLADE

- THE KSL® kan vælges med en titanium fodbøjle for at reducere vægten yderligere.



Küschall®

THE KSL®

HELSTØBT STÆRK RAMME

- Den fuldsvejste ramme fremstillet i ét stykke kombinerer æstetik med de bedste køreegenskaber. Og med en transportvægt på kun ca 4,3 kg, er THE KSL den letteste Küschall kørestol.

CARBOLIFE DRIVRINGE

- CarboLife er high-end drivringe, der giver et godt og ergonomiske greb samtidig med, at de stabiliserer håndledet. Formen og gummiindlægget øger friktionen og sikrer optimale køreegenskaber.


FORHJULSOPHÆNG

- Den smarte aluminiumsprofil med integrerede kuglelejer sikrer mod opsamling af skidt og er lettere at vedligeholde.

EGENSKABER

FREMSTILLET PÅ MÅL

THE KSL® fremstilles altid præcist i de vinkler og mål, der passer nøjagtigt til brugeren for at opnå den letteste og stærkeste konstruktion. Selve rammen og rygbøjlen samt forhjulsophæng og fodbøjle -det hele på THE KSL® er elegant fremstillet i det samme gennemførte design.

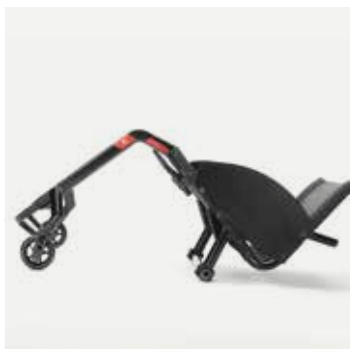

SUPER LET

THE KSL® kan vælges med carbonkomponenter. Dette giver dig yderligere mulighed for at opnå en utrolig lethed, sammenlignelig med fuld carbonfremstillede kørestole, men også med optimal styrke og køreevne.

ELEGANT

Vi har optimeret designet af fodbøjlen, et grundlæggende element for en optimal siddestilling. Med en flad side mod fødderne giver den elegante fodbøjle mere stabilitet.




HYDROFORM DESIGN

Den nyeste teknologi indenfor fremstilling af kørestole er hydroforming, hvilket gør THE KSL endnu stærkere. Vores ingeniører og designere har valgt denne teknologi for at give brugeren det bedste af det bedste. Med en kørestolsramme som THE KSL bliver det ikke bedre.

PERSONLIGE VALG

1 STANDARDFARVER

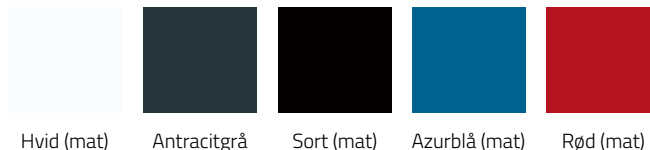

SPECIALFARVER*




* 10 dages ekstra leveringstid ved valg af specialfarve

2 VÆLG LOGODESIGN



3 VÆLG PRINTFARVE

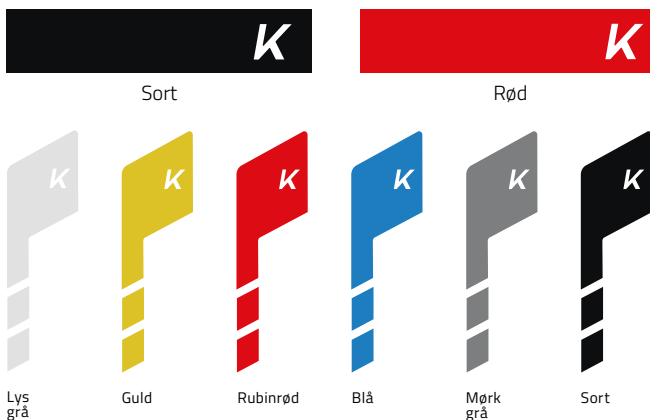

TEKNISKE DATA

SÆDE- BREDDE

340 – 440 mm
interval 20 mm



SÆDE- DYBDE

385 – 485 mm
interval 25 mm



UNDERBENS- LÆNGDE

350 – 500 mm
interval 10 mm



RYG- HØJDE

270 – 420 mm
interval 15 mm



RYG- VINKEL

74° / 78° / 82° /
86° / 90°



SÆDE- HØJDE

For: 450 – 530 mm
Bag: 400 – 480 mm
interval 10 mm



RAMME- VINKEL

75° / 90°
Lige eller V-formet



TOTAL- BREDDE

SB + 170 mm



TOTAL- LÆNGDE

75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm



BALANCE- PUNKT

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMBRING

0° / 3° / 6°



TOTAL- VÆGT

ca. 6.8 kg



TRANSPORT- VÆGT

ca. 4.3 kg



MAX. BRUGERVÆGT

100 kg



Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebrede 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan ændres med forskellige konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tlf.: +45 36 90 00 00
www.invacare.dk
denmark@invacare.com

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world og K-Series er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder Invacare International GmbH sig ret til at tilpasse de enkelte modeller.
© Juni 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. DK - 1659367