

VICAIR[®]

Vicair[®] Centre Relief O2



**Specialpude til optimal aflastning
af sakral-området**



Yes, you can.[®]

Vicair® Centre Relief O2

Vicair Centre Relief O2 er en ny og forbedret Vicair pude, med en særlig midterzone, der giver mulighed for aflastning af sakral-området.

Puden sikrer optimal aflastning og kan vaskes inklusiv indholdet af Smartcells™. Hele Centre Relief O2 kan rengøres i en vaskemaskine ved 60 grader.

Centre Relief O2 leveres med et unikt og vaskebart inderbetræk, der er fremstillet med en åben struktur. Dette gør puden optimalt åndbar og regulerende med hensyn til varme og fugt.

Ekstra bæckenstabilitet
med støtte til trochanter

Ekstra trykaflastning af sakral-området



Nem justering af Centre Relief O2, mens brugeren sidder på puden



100% vaskbar i maskine

Vicair Centre Relief O2 kan vaskes i vaskemaskine ved 60°C uden at tømme puden for Smartcell™.



Box effekt

Lynlåsens udformning gør Vicair Centre Relief O2 mere stabil at sidde på, og giver samtidig mulighed for at justere indholdet og dermed positionere brugeren, mens denne sidder på puden.



100 % åndbar

På grund af inderbetrækkets åbne struktur er der mulighed for god ventilation af både varme og fugt.



Mange størrelser

Vicair Centre Relief O2 findes i mange forskellige størrelser.




Vicair teknologi

Invacare Vicair puderne benytter sig af Vicair Technology™, en unik og innovativ metode til støtte og aflastning af kroppen.

Puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet Smartcells™, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens former og danner en stor overflade.

Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Når Vicair Centre Relief O2 skal rengøres lægges hele puden inklusiv celler i vaskemaskinen, og puden lufttørres fx natten over.

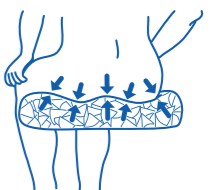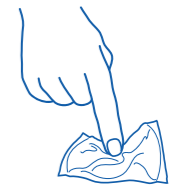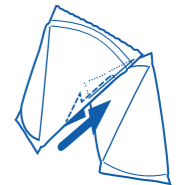

Optimal positionering og trykaflastning

Vicair Centre Relief O2 er klinisk testet med gode resultater. Midtersektionen på puden kan justeres ved at udtage celler, så der kan opnås fuld aflastning. Derudover giver puden en høj grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort og øget bevægelsesfrihed.

Vicair Centre Relief O2 puderne er inddelt i 5 kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering. Puden kan justeres, mens brugeren sidder på puden på grund af placeringen af lynlås langs pudens side.

Vicair Centre Relief O2 er vedligeholdelsesfri og altid klar til brug. Nem at indstille, optimal stabilitet og enkel vedligeholdelse.



Betræk

Standard betrækket er åndbart, komfortabelt og strækbart i alle retninger. Standardbetrækket lukkes omkring puden med en lynlås.







Inkontinensbetrækket er ligeledes åndbart og strækbart - lukkes omkring puden med lynlås.

Begge betræk er universal betræk, der kan anvendes på flere Vicair puder, hvilket giver fleksibilitet.

Begge betræk er forsynet med en lille åbning bagtil, som den blå strop kan trækkes igennem. Når den blå strop er synlig, ved man, at puden ligger korrekt i betrækket.

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Størrelser ▼	Vægt ▼	Max. brugervægt: ▼	Rengøring af pude inkl. betræk ▼	Rengøring af betræk ▼	
					
se skema nedenfor	0,5 - 0,85 kg	15 - 250 kg	60°	90°	

Størrelser (b x d)

Højde

Betræk

400 x 400 mm
430 x 430 mm
450 x 450 mm
450 x 500 mm
500 x 500 mm

100 mm



Sort

Vicair Centre Relief O2 puder leveres i en række specialstørrelser. Kontakt Invacare for bestilling.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®