

Flo-tech[®] Lite Visco



Lav formstøbt skumpude i viscoelastisk
skum giver ekstra komfort



Yes, you can.

Invacare **Flo-tech Lite Visco** er en lav formstøbt pude fremstillet i temperaturfølsom kvalitetsiskum, der følger brugerens form. Dette giver enestående komfort, samtidig med trykaflastning i lavrisiko-gruppen. **Flo-tech Lite Visco** er ideel til brug i både lænestol og i kørestolen, hvor der ønskes minimal sædeforhøjelse.

Viscoelastisk skum

Det temperaturfølsomme skum er designet til at øge kontakten mellem brugeren og sædeflader og følger brugerens krop, optimerer kontakten mellem bruger og sædeflade, og tilbyder derved god komfort og let trykaflastning.

Anatomisk formet siddeflade

Giver god stabilitet og postural støtte. Den specielle formstøbning af siddeflader reducerer shear- og friktionskræfter mod brugerens hud.

Egenskaber og tilbehør



Inkontinensbetræk

Betrækket er to-vejs strækbart, vandafvisende og åndbart. Betrækket har skridsikker bund og er forsynet med bærehåndtag.



Leveres i 9 størrelse

Flo-tech Lite Visco kan leveres i 9 forskellige størrelser fra 40 x 40 cm til 45 x 50 cm.



2 forskellige skumhårdheder

Flo-tech Lite Visco leveres i 2 forskellige skumhårdheder afhængig af brugervægt:
Medium (op til 51 kg)
Fast (op til 100 kg)



Ultra-fresh™

Flo-tech anvender skum, der er behandlet med **Ultra-Fresh**. **Ultra-Fresh** er en antimikrobiel behandling af skummet, der beskytter mod støvmider, bakterier og dertil hørende lugtgener.

- Mindre lugtgener
- Større holdbarhed
- Større genbrugsværdi
- Kan anvendes af støvmideallergikere

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Antal størrelser		Højde		Vægt		Max. brugervægt		Rengøring	
9		6 cm		1.26 kg		Medium op til 51 kg Fast op til 100 kg		80°	


Fremstillet i henhold til følgende Europæiske standarder: Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5 Betræk: BS 7177: 1989 Crib 5

Betræk:

- Vandafvisende
- Åndbart
- Strækbart

Farve

Sort

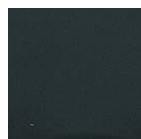

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.