



Trykaflastende skummadras

Invacare **Softform Premier** er en antidecubitusmadras, der er udviklet i samarbejde med klinikere. Resultatet er blevet en trykaflastende madras i særklasse, til brugere, hvor såvel komfort som trykaflastning er vægtet højt. I udformningen af **Softform Premier** er der taget særlig højde for trykreducering ved hælene. **Softform Premier** er praktisk og holdbar og giver enestående komfort og trykaflastning.




Egenskaber

Forebyggelse af tryksår

Invacare **Softform Premier** er en 2-delt madras, bestående af en ydre skal og indeni en skumkerne opskåret i profiler, der er individuelt fleksible. Profileringen er desuden varieret. Under sædepartiet er profilerne således store og nøglehulsopskårede. Dette gør hele overfladen effektivt trykfordelende. Madrassen er trykmålt på HMI med særdeles gode resultater. Desuden findes klinisk dokumentation.

Leveres med inkontinensbetræk

Betrækket er strækbart i flere retninger og er fremstillet af vandafviselig polyurethan med svejsede samlinger og afdækning ved lynlås; madrassens skumkerne er således effektivt beskyttet. Ligeledes beskyttes skumkernen af en hård PU-skål, der forlænger madrassens levetid.

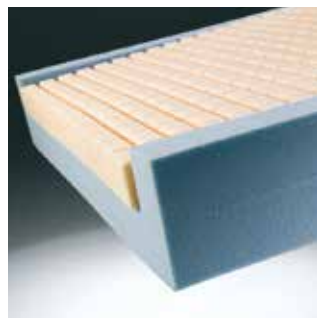

Reduceret/formet overflade ved hæle

Skummet i madrassens benende er formet til bedre at kunne aflaste brugerens hæle, da der her ofte er stor risiko for udvikling af tryksår.



Nem at transportere

Madrassen er monteret med to bærehåndtag og er således nem at transportere.



Såvel betræk som skum er mærket med "This side up"


Madrassen tillader brugeren at synke ned i materialet, hvilket giver mulighed for en jævn fordeling af trykket.

Tekniske data




Softform Premier

830, 850,
880, 900 mm

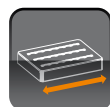

2000 mm

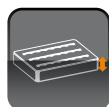

140 mm



13 kg



247 kg



Softform Premier

Rengøring: 80°



Produceret efter Europæiske standarder:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Skum: BS 5852: 1990 Crib Source 5;
Betræk: BS7175: 1989 Crib Source 5.

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

SF Premier- DK - 05/2016

Farve



Blå