



### Et ryg-/sædesystem med mange muligheder

Invacare Rea **Flex3** er et fleksibelt ryg-/sædesystem med mange positioneringsmuligheder, herunder god mulighed for individuel tilpasning.

**Flex3** kan anvendes på både Invacares komfortkørestole, samt på Invacares elektriske kørestole.

Et komplet **Flex3** ryg-/sædesystem sammensættes af et stort udvalg af rygbaser, rygpuder, sædepuder, armlæn, benstøtter og øvrigt tilbehør med eller uden el-funktioner.

**Flex3** kan vælges og justeres i forskellige bredder, højder, dybder og tilpasses nøjagtigt til den enkelte brugers ønsker og behov.

**Flex3** tilbyder en stor grad af kompatibilitet komfortkørestole og el-kørestole imellem, hvilket både bruger og køber har glæde af.

Trusted Solutions, Passionate People



### Fleksibilitet og individuelt justering

Invacare Rea® **Flex3** rygge kan tilpasses efter brugerens behov for støtte i såvel bredde som højde og evt. asymmetrisk - fx bred forveden og smal foroven. **Flex3** giver øget stabilitet og forbedrer positioneringen af borgeren.

### Hurtig og enkelt at tilpasse

**Flex3** kan monteres med enten fast rygplade eller stropryg og efterfølgende kan disse ombyttes efter ønske, hurtigt og enkelt, uden brug af værktøj.

**Flex3** kan monteres med aftagelige armlæn og en lang række forskelligt tilbehør.

Fleksibiliteten, de mange justeringsmuligheder og det store tilbehørsprogram gør, at der er stor genbrugsværdi ved **Flex3**.

### Utallige muligheder for valg af ryg og sædebredde



- |   |  |   |  |  |   |  |   |   |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|---|---|
| <b>Lav</b><br>Sæde- og rygindstillinger så tæt på chassiset som muligt. | <b>Høj</b><br>Forlænget ryghøjde, dybere sæde. | <b>Normal</b><br>Tilpasninger af sæde og ryg indenfor standard mål. | <b>Bred</b><br>Ryglæn og sæde udvides. | <b>Bred foroven</b><br>Ryglænet bredt foroven, og smalt forveden samt et smalt sæde. | <b>Bred forveden</b><br>Ryglænet smalt foroven, og bredt forveden samt et bredt sæde. | <b>Stor fortil</b><br>Øverste del af ryglænet med øget plads til skuldre og øverste del af ryggen. | <b>Stor bagtil</b><br>Nederste del af stropryggen indstilles med god plads. | <b>Kyfoet ryg</b><br>Midtersektionen af stropryggen tillader ekstra plads til den kyfoetiske ryg. | <b>S-formet ryg</b><br>Stropryggen kan indstilles til ekstra støtte eller plads, hvor der er behov. |
|---|--|---|--|--|---|--|---|---|---|

### Flere rygge - samme stol



**Flex 3** ryggen kan tilpasses efter brugerens behov for støtte i såvel bredde som højde og evt. asymmetrisk - fx bred forveden og smal foroven. Desuden tilbyder ryggen, som standard, en unik mulighed for at skabe ekstra vinkling foroven eller forveden.


Den faste rygplade kan indstilles i højden og bredden fx bred foroven og smal forveden.

## Sæde- og rygoptioner



### Komfort rygslag

Et blødt polstret rygslag, der automatisk formes efter stropryggens facon og brugerens kropskonturer.

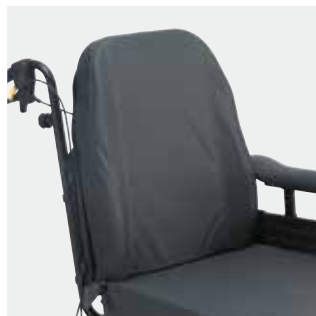

### Laguna rygpude

**Laguna** rygpuden giver med dens formede sider i skum brugeren en afslappet og komfortabel støtte.



### Mistral<sup>2</sup> rygpude

**Mistral<sup>2</sup>** rygpuden giver med sine ekstra store og stabile sidestøtter brugeren en optimal siddestilling med god støtte og samtidig en stor frihedsgrad for bevægelse af armene.



### Passad<sup>2</sup> rygpude

**Passad<sup>2</sup>** rygpude giver stabilitet og komfort og er især velegnet til brugere med stort behov for støtte ved skuldre og bækken.



### Rygpude høj

Den høje rygpude er egentlig samme type pude som **Passad<sup>2</sup>** rygpuden, blot 100 mm højere og dermed designet til høje brugere.



### Vicair<sup>®</sup> Multifunctional

En trykaflastende og positionerende rygpude, der kan tilpasses individuelt til den enkelte bruger. Rygpuden er opdelt i separate rum fyldt med **Vicair<sup>®</sup> Smart Cells<sup>™</sup>**.



### Matrx fast ryg

**Flex3** kan monteres med **Matrx** multijusterbare faste rygge, der giver en stabil og komfortabel støtte samt en god bevægelsesfrihed.



### Nakkestøtte

Har samme monteringsbeslag som hovedstøtten. Konturformet for at give god støtte til nakke og nederste del af hovedet.



### Hovedstøtte sideværts justerbar

Med vinkeljusterbare "vinger" på siderne. Hovedstøtten er dybde-, vinkel-, højde- og sideværts justerbar og kan dermed indstilles individuelt til den enkelte bruger.



### Hovedstøtte med hagestyr

Har samme monteringsbeslag som standard hovedstøtten. Dog giver udformningen af selve hovedstøttepuden mulighed for optimal støtte til den mere passive bruger.



### Vaskbart overtræk

For lettere vedligeholdelse af nakke- og hovedstøtte kan anskaffes et aftageligt og vaskbart overtræk af Dartex.

## Øvrige optioner



### Fast kropsstøtte

Kropsstøtten er bredde og dybdejusterbar samt aftagelig.



### Kropsstøtte svingaway

Kropsstøtte med svingaway beslag fås både med fast støttede pude og med en mere komfortabel, multijusterbar pude.



### Kropsstøtte med multijusterbar pude

Er med sine mange indstillingsmuligheder let at forme til den enkelte bruger. Passer til alle typer rygge og rygpunder.



### Monteringsbeslag for sele

Monteres sammen med nakkestøtte eller hovedstøtte. Sele/vest kan monteres korrekt over skulderhøjde.



### Seler og bæltter

Vi tilbyder et stort program i seler, bæltter og bespændinger. Se iverigt Invacares brochure for seler og bæltter.



### Overgangsdække

Dækker for et eventuelt mellemrum mellem rygplade og sæde.



### Kiler

Faste positioneringskiler til at give let støtte under sædepude eller bag rygpunder.



### Standard armlæn

Med komfortable og rengøringsvenlige armlænspunder, der er aftagelige og justerbare - frem/tilbage og højde.



### Hemiplegiarmlæn

Højde-, dybde- og vinkeljusterbare for at give optimal komfort for brugeren.



### Benstøtter

**Flex3** giver mulighed for montering af forskellige sidehængte benstøtter.



### Vinkelstilbare fodplader

Fodpladerne kan indstilles i dybde, højde og vinkel. Her vist med hælerem, som er standard på komfortstole.



### Amputationsbenstøtte

Giver brugeren perfekt støtte, er højde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med sving ind/sving ud funktion.

## Sæde og sædepuder



### Skumpuder

Invacare tilbyder en lang række gode siddepuder med positionerende og tryksårforebyggende egenskaber. Se venligst særskilte brochure for yderligere information.



### Floshape sædepude

Konturformet standardpude i latexskum opskåret i lave profiler. Pudens form følger kroppens konturer, og giver derved en god trykafledning. Leveres med både plys og Dartex betræk.



### Inkontinensbetræk

Det løse inkontinensbetræk passer til standardpuderne. Kan vaskes ved 60°.



### Vicair® Multifunctional

En trykafledende og positionerende sædepude, der tilpasses individuelt til den enkelte bruger.



For yderligere informationer se særskilt brochure om **Azalea** og **Dahlia** tilbehør

## Vælg den bedste komfortkørestol

### Rea® Azalea familien

Rea **Azalea** familien er det naturlige valg til den moderat aktive bruger såvel til den passive bruger. **Azalea** tilbyder 25° sædeklip og 30° rygtilt. **Azalea** familien dækker behov for en lang række brugere:

<b>Azalea</b>	Kan tilpasses langt de flestes brugeres behov for komfort og positionering
<b>Azalea Base</b>	Komfortkørestolsbase forberedt for specielle sædesystemer, fx skalsæder
<b>Azalea Minor</b>	Komfortstolen velegnet til små voksne eller teenagere
<b>Azalea Tall</b>	Velegnet til høje brugere ved hjælp af et særligt kit til <b>Azalea</b>
<b>Azalea Max</b>	Komfortløsningen til store brugere

### Rea Dahlia® familien

Rea **Dahlia** er den alsidige, smalle komfortstol til de mere aktive brugere med mulighed for let at køre kørestolen selv eller med et behov for øget trykaflastning og sædetilt.

**Dahlia 45** Markedets bedste mulighed for at give trykaflastning og komfortable siddestillingskift i løbet af dagen. Har et sædeklip på helt ned til 45° samt et rygtilt på 30°.

**Dahlia 30** En mulighed for at opnå 30° på både sædeklip og rygtilt samt en stor variation af sædehøjder med bl.a. mulighed for at kunne nå gulvet med fødderne og gå kørestolen frem



### Betræk



Sort plys



Sort Dartex

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved tryknings-  
tidspunktet korrekt. Invacare for-  
beholder sig retten til at foretage  
konstruktionsændringer uden  
forudgående varsel.

Rea Flex3 - DK - 10/2016



Yes, you can.®